

Brava®

 **Coloplast**

Brava Protective Sheet



Coloplast A/S
Høttedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Instructions for use

23331765 Version 2

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved. © 2024-04-11

Intended purpose

Intended for protection of intact skin against stoma output, and for skin protection where body secretion may damage the skin.

Warnings

Re-use of the single use product may create a potential harm to the user.

Reprocessing, washing, disinfection and/or sterilisation may compromise product characteristics, causing additional risk of physical harm or infection to the user.

Information

The sheet is highly adhesive in order to provide the greatest possible security, and it is very important that all hair is removed from the application site before the sheet is applied.

Both adhesion and security are reduced if cream is used. However, a thin layer of cream can be used in certain cases if you find the Protective Sheet adheres too strongly.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.


How to use




Remove the protective paper from the non-adhesive side of the sheet (bend at split-line and remove protective paper).




Mark the desired hole size with a pen.

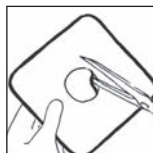

With a pair of scissors, cut out the desired hole size according to the marking.

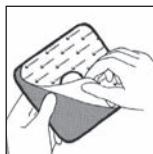

Clean and dry skin around the stoma.
Remove the protective paper from the adhesive side.

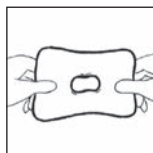

Place the adhesive on the skin and press firmly with your fingers. The elasticity of the sheet allows the hole to widen when it is put in place e.g. over a stoma. It retracts immediately ensuring a completely snug fit around the stoma.

Removal

The Protective Sheet should be removed slowly and carefully.

Disposal

The product is intended for single use only and should be disposed of in accordance with local guidelines, e.g. with normal household waste.

Do not flush the product down the toilet.

Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 10 pieces per retail box

Explanation of symbols



Medical device



Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices



Catalogue number



Use-by date (YYYY-MM-DD)



Batch code



Date of manufacture (YYYY-MM-DD)



Manufacturer



Consult instructions for use



Do not re-use



Indicates a barcode as containing Unique Device Identification



Global Trade Item Number



Keep away from sunlight



Recyclable packaging



MR Safe

Brava®

Coloplast

บอกว่า แผ่นปิดปกป้องผิวหนัง



Coloplast A/S
Høttedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

คำแนะนำในการใช้งาน

23331766 Version 2

โลโก้ Coloplast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Coloplast A/S สงวนลิขสิทธิ์ © 2024-04-11

วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผิวหนังที่ยังคงสมบูรณ์จากสิ่งที้ออกมาจากรูเปิดทางหน้าท้อง และสำหรับการปกป้องผิวหนังที่อาจได้รับอันตรายจากสารคัดหลั่งจากร่างกาย

คำเตือน

การนำเอาผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ครั้งเดียวมาใช้ซ้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

การนำกลับมาใช้ซ้ำ การซัก การฆ่าเชื้อ และ/หรือการทำปราคาจากเชื้ออาจส่งผลให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีประสิทธิผลลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อผู้ใช้จากอันตรายต่อร่างกายหรือการติดเชื้อ


ข้อมูล

แผ่นมีกาวที่ติดแน่นเป็นพิเศษเพื่อให้มีความปลอดภัยในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการกำจัดเส้นขนทั้งหมดออกจากบริเวณที่จะนำแผ่นไปติด

ทั้งการติดแน่นและความปลอดภัยจะลดลงหากใช้ครีม อย่างไรก็ตาม สามารถทาครีมบาง ๆ ได้ในบางกรณี หากพบว่าแผ่นป้องกันยึดติดแน่นมากเกินไป

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์


วิธีใช้

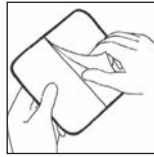


ลอกกระดาษป้องกันออกจากด้านที่ไม่มีกาวของแผ่น (งอตามเส้นแบ่งและลอกกระดาษป้องกันออก)




ใช้ปากกาทำเครื่องหมายขนาดรูที่ต้องการ

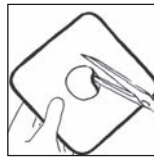

ใช้กรรไกรตัดตามเครื่องหมายเพื่อให้ได้ขนาดรูที่ต้องการ

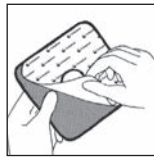

ทำความสะอาดผิวหนังรอบรูเปิดที่หน้าท้องให้แห้งและสะอาด ลอกกระดาษป้องกันด้านที่มีกาวออก

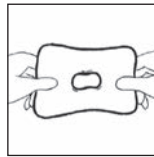

ติดกาวบนผิวหนังแล้วใช้นิ้วกดให้แน่น ความยืดหยุ่นของแผ่นปิดช่วยให้รูกว้างขึ้นเมื่อติดเข้ากับ เช่น เหนือรูเปิด แผ่นจะหดรัดกลับทันทีเพื่อให้มั่นใจว่ากระชับพอดีกับรูเปิด

การแกะ

ควรถอดแผ่นป้องกันออกช้า ๆ ด้วยความระมัดระวัง

การกำจัด

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานครั้งเดียวเท่านั้น และควรกำจัดตามแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น เช่น ร่วมกับขยะในครัวเรือนตามปกติ

ห้ามทิ้งลงในชักโครก

การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 10 ชิ้นต่อกล่อง

คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด
กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่อง
มือแพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



วันที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



ห้ามใช้ซ้ำ



รหัสชี้เฉพาะเครื่องมือแพทย์



(Global Trade Item Number) รหัส
รายการสินค้าสากล



เก็บให้พ้นแสง



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้



ปลอดภัยต่อการนำเข้า MRI