

# Brava®

Brava Elastic Tape  
Elastic Tape XL  
Elastic Tape Belt  
Elastic Tape Straight



Coloplast A/S  
Høtveddam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

## Instructions for use

23327870 Version 1  
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved. ©  
2021-07-26



## Intended purpose

Brava Elastic Tape is intended to support the rim of the ostomy baseplate/adhesive by providing additional adhesion to the intact peristomal skin.

## Indications

Brava Elastic Tape is indicated for people who use an ostomy bag and baseplate/adhesive.

## Warnings

Re-use of the single use product is not recommended cross contamination may occur.

Reprocessing, washing, disinfection and/or (re)sterilisation may compromise product characteristics, causing additional risk of physical harm or infection to the user.

## Cautions

Keep away from sunlight as it may impact product quality.

Do not stretch the product when applying as it may impact product performance.

## Information

Single use product.

The products are intended to be stored in the box until removed for use, as the box protects the products and the label on the box contains important information like batch code, use-by date and a unique barcode.

The device does not have to be removed before an MR scan as it is MR safe.

Coloplast accepts no liability for any injury or loss that may arise if this product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations.

## Special storage conditions

Keep away from sunlight.

Store product horizontally.

## How to use


### Opening the box

Hold the turquoise tab and pull back to open. Do not tear the tab as it allows you to re-seal the box.

### Application

#### Elastic Tape


#### Elastic Tape XL

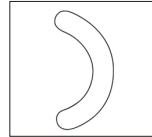


Remove either of the protective paper sheets before applying.

Place the tape where desired on the baseplate/adhesive where you need support. Remember that a part of the adhesive should be covered by the tape.

Do not stretch the product when applying.

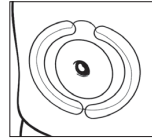


Remove the remaining protective paper sheet and smooth the tape onto the skin. Repeat if necessary.

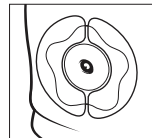

Elastic Tape XL can also be used with SenSura® Mio Concave baseplate.


#### Elastic Tape Belt

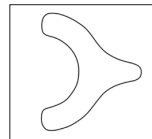

Remove either of the protective paper sheets before applying.


Place the tape where desired on the baseplate/adhesive where you need the extra support. Remember that a part of the adhesive should be covered by the tape.

Do not stretch the product when applying.

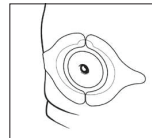

Remove the remaining protective paper sheet and smooth the tape onto the skin. Repeat if necessary.


#### Elastic Tape Straight

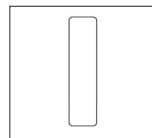

Remove either of the protective paper sheets before applying.

Place the tape where desired on the square baseplate/adhesive where you need support. Remember that a part of the adhesive should be covered by the tape.

Do not stretch the product when applying.

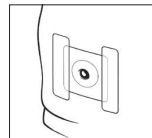

Remove the remaining protective paper sheet and smooth the tape onto the skin. Repeat if necessary.

You can place the tape wherever you feel you need to support the baseplate/adhesive.

### Removal of the tape

The tape may come off together with the adhesive. If needed, loosen the edges of the tape and gently stretch the tape for removal.

### Disposal

The product is intended for single use only and should be disposed of in accordance with local guidelines, e.g. with normal household waste.

Do not flush the product down the toilet.

### Reporting of incidents

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

Pack size: 20 pieces per retail box

### Explanation of symbols



Medical device



Indicates that the product is in compliance with European legislation for medical devices



Catalogue number



Use-by date (YYYY-MM-DD)



Batch code



Date of manufacture (YYYY-MM-DD)



Manufacturer



Consult instructions for use



Do not re-use



Global Trade Item Number



Keep away from sunlight



This way up



Recyclable packaging

# Brava®

บรว่า อีลาสติก เทป  
อีลาสติก เทป ขนาด  
ใหญ่  
อีลาสติก เทป ชนิด  
เข็มขัด  
อีลาสติก เทป ชนิดเส้น  
ตรง



Coloplast A/S  
Holtedam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark  
คำแนะนำในการใช้งาน  
23327666 Version 1  
โลโก้ Coloplast เป็น  
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Coloplast A/S  
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021-09-14



## วัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมาย

บรว่า อีลาสติก เทป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประคองขอบของแป้นทวารเทียม/ แขนงาว โดยการเพิ่มพื้นผิวสำหรับยึดเกาะกับผิวหนังรอบทวารเทียม

## ข้อบ่งใช้

บรว่า อีลาสติก เทป ใช้สำหรับผู้ที่ใส่แป้น/ แขนงาวและถุงเก็บของเสียจากทวารเทียม

## คำเตือน

ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่แนะนำให้นำอุปกรณ์นี้มาใช้ซ้ำเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อน

การตัดแปด ซักล้าง ใช้น้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อ และ/หรือ การนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ อาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มความเสี่ยงต่ออันตรายทางกายภาพของผู้ใช้งาน

## ข้อควรระวัง

เก็บให้ห่างจากแสงแดดเนื่องจากอาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
อย่ายึดผลิตภัณฑ์เมื่อแปะลงบนแป้นเนื่องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน

## ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในกล่องจนกว่าจะนำออกมาใช้ เนื่องจากกล่องจะช่วยปกป้องตัวผลิตภัณฑ์และฉลากบนกล่องมีข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ผลิต วันที่หมดอายุและบาร์โค้ด

อุปกรณ์นี้มีความปลอดภัยต่อการใช้ในเอมอาร์ ไม่จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ออกก่อนการทำเอมอาร์ สแกน

โคโลพลาสต์จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้น หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำในปัจจุบันของโคโลพลาสต์

## สภาวะในการเก็บรักษาพิเศษ

เก็บให้พ้นแสง

วางกล่องบรรจุภัณฑ์ในแนวนอน


## วิธีใช้

### การเปิดกล่อง

ดึงแถบสีฟ้าเทอควอยซ์เพื่อเปิด อย่าฉีกแถบสีฟ้าทิ้งไปเนื่องจากแถบนี้ใช้ปิดกล่องบรรจุ

### การใช้


อีลาสติก เทป  
อีลาสติก เทป ขนาดใหญ่

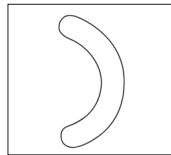


แกะกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งออก

วางเทปทับบนแป้น/ แขนงาว ในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อควรทราบคือเทปจะต้องปิดคลุมทับในส่วนของแป้น

อย่ายึดผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน

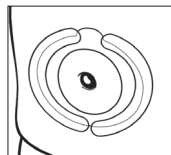


แกะกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านที่เหลือออกแล้วลูบเทปให้ติดแนบสนิทกับผิวหนัง ทำซ้ำได้หากต้องการ

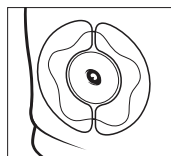

อีลาสติก เทป ขนาดใหญ่ สามารถใช้ร่วมกับแป้นแบบคอนเคฟของเซนซูรา มีโอ


### อีลาสติก เทป ชนิดเข็มขัด

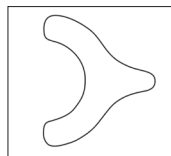

แกะกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งออก


วางเทปทับบนแป้น/ แขนงาว ในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อควรทราบคือเทปจะต้องปิดคลุมทับในส่วนของแป้น

อย่ายึดผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน

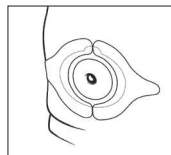

แกะกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านที่เหลือออกแล้วลูบเทปให้ติดแนบสนิทกับผิวหนัง ทำซ้ำได้หากต้องการ


### อีลาสติก เทป ชนิดเส้นตรง

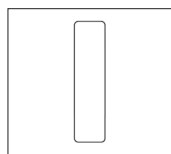

แกะกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านใดด้านหนึ่งออก

วางเทปทับบนมุมทั้งสี่ด้านของแป้น/ แขนงาว ในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อควรทราบคือเทปจะต้องปิดคลุมทับในส่วนของแป้น

อย่ายึดผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน

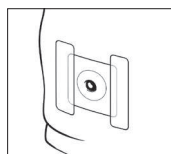

แกะกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านที่เหลือออกแล้วลูบเทปให้ติดแนบสนิทกับผิวหนัง ทำซ้ำได้หากต้องการ

วางเทปทับบนแป้น/ แขนงาว ในตำแหน่งที่ต้องการ ข้อควรทราบคือเทปจะต้องปิดคลุมทับในส่วนของแป้น

### การเอาเทปออก

เทปอาจหลุดออกมาพร้อมกันกับแป้นทวารเทียม หากจำเป็น แกะขอบเทปแล้วค่อยๆดึงออก

### การกำจัด

ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานครั้งเดียวเท่านั้น และควรกำจัดตามแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น เช่น ร่วมกับขยะในครัวเรือนตามปกติ

ห้ามทิ้งลงในชักโครก

### การรายงานเหตุการณ์

หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง กรุณาแจ้งบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ขนาดบรรจุ : 20 ชิ้นต่อกล่อง

### คำอธิบายสัญลักษณ์



เครื่องมือแพทย์



ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับเครื่องมือแพทย์



หมายเลขแคตตาล็อก



วันที่หมดอายุ (ปปปป-ดด-วว)



รุ่นที่ผลิต



วันที่ผลิต (ปปปป-ดด-วว)



ผู้ผลิต



คำแนะนำในการใช้งาน



ห้ามใช้ซ้ำ



(Global Trade Item Number) รหัสรายการสินค้าสากล



เก็บให้พ้นแสง



วางด้านนี้ขึ้น



สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำได้